نکات نصب قد سنج گونیا بر روی دیوار

۱-این قدسنج تا ارتفاع ۲۰۰ سانتی متر را نشان می دهد و حداقل اندازه گیری ۳۹ سانتی متر می باشد.

۲-بوسیله یک متر بر روی دیوار فاصله ۲۰۰ سانتی متر را از کف اتاق اندازه گیری نماید .و نشان گذاری کنید

۳-از متری استفاده کنید که حالت کشسانی(پلاستیکی) نداشته باشد.

۴-متر باید کاملا بر کف اتاق عمود باشد تا فاصله به درستی نشانه گذاری شود.

۵- قدسنج را بر روی دیوار گذاشته به صورتی که فاصله ۲۰۰ سانتی متری نشانگذاری شده بر روی دیوار منطبق با خط قرمزی افقی باشد که عدد ۲۰۰ سانتی متر را درقد سنج گونیا نشان می دهد.



خط قرمز دقیقا بر روی ۲۰۰ سانتی متر نشان گذاری شده باید قرار بگیرد

۶-قدسنج را محکم با پیچ های داخل جعبه بر روی دیوار نصب نمایید (برای نصب قدسنج از میخ استفاده نکنید).


۷- برای اندازه گیری قد شخص مراجعه کننده، باید گونیا بصورت عمود بر روی سر فرد قرار گیرد (هنگـام کشـیدن، گونیـا قدسنج نباید به سمت چپ یا راست متمایل شود)






استفاده قدسنج به این حالت اشتباه می باشد

۸ –چنانچه دیوار قرنیز و یا تا نیمه سنگ باشد و نیاز به اندازه گیری و مشخص شدن ارتفاع مشخصی (۲۰۰ سانتی متر) هستید این فاصله بصورت زیر اندازه گیری شود.

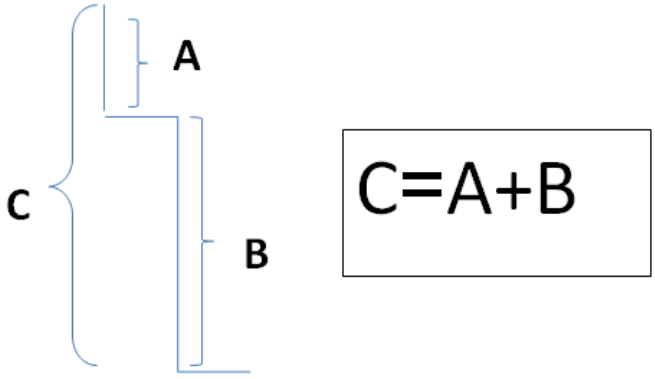

۹–هیچگاه برای نصب قدسنج، متر را بصورت فلش قرمز به روی دیوار قرار ندهید.

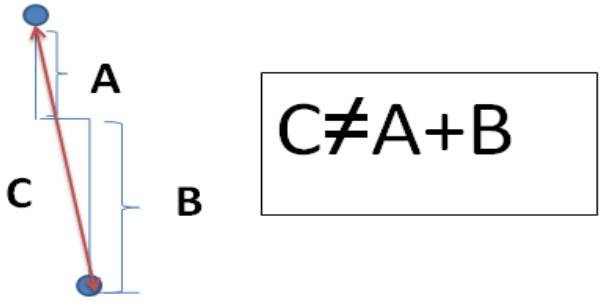

۱۰–قد سنج را بر روی دیواری که تا نیمه سنگ یا قرنیز می باشد نصب نکنید و اگر ناچار به نصب قدسنج بر روی دیواری هستیم که این مشکلات را دارد باید این اختلاف فاصله بوسیله یک قطعه MDF (که بصورت طولی برش داده شده است) را بپوشانیم.

۱۱–برای تصب قدسنج از تاسیسات کمک بگیرید (پیچ قد سنج بر روی دیوار دریل می شود)

تهیه کننده:

مرضیه نجفی (کارشناس تجهیزات پزشکی شهیدبلندیان)